

DEKA
Innate Ability

UPPTÄCK NYA **PRO SYSTEMET**



MOTUS
PRO

Snabba och effektiva skönhetsbehandlingar

Oslagbara prestanda vid hårborttagning,
hudföryngring och vaskulära behandlingar.

Framstående inom **estetiska** och **dermatologiska**
behandlingar



MOTUS PRO

EVOLVING EXCELLENCE

- HÅRBORTTAGNING
- VASKULÄRA BEHANDLINGAR
- GODARTADE
PIGMENTERINGAR
- ICKE-ABLATIV
HUDFÖRYNGRING
- KÄRL PÅ BEN
- FOLLIKULIT
- NAGELSVAMP
- TOTAL ANSIKTSBEHANDLING
MED MOVEO GLOW



Nyckelprinciper


Maskinerna i Motusserien har i grunden förändrat patienters upplevelse av smärtfria hårborttagningsbehandlingar. Nu utökas därför DEKAs Motusfamilj med en ny medlem, MOTUS PRO: en plattform med två kompletterande våglängder (755nm Alexandrit + 1064 Nd:YAG). Med sin helt nya design och nya teknik möjliggör MOTUS PRO snabbare behandlingar, högre energinivåer och ett stort utbud av spotstorlekar och specifika pulser – vilket sammantaget gör det här till en av den mest avancerade och flexibla utrustningen på marknaden.

Därför ska du välja MOTUS PRO:

Hög Topp-
styrka
2-3 ms

Snabbt, Säker och Starkt

Behandlingarnas längd har reducerats med 50% tack vare MOTUS PROs maximerade prestanda, större spotstorlekar (upp till 24 mm) och en ökad toppstyrka.

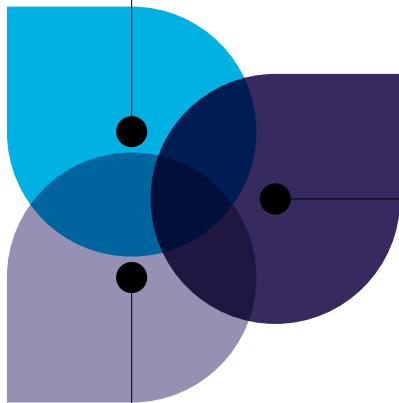

Traditionellt eller med Moveo Teknologi

MOTUS PRO har båda teknologier: Välj mellan 10 standardhandtag och 4 Moveohandtag och tillgodose alla dina kunders önskemål – på bästa möjliga sätt.

Komfort och resultat

Tack vare den ökade styrkan blir behandlingarna nu mycket effektivare och så gott som helt smärtfria (kylkapaciteten ligger nu på ca 40%).

MOTUS PRO

TEKNIKEN BAKOM

Framgångsrika hårborttagningsbehandlingar:

MOTUS PRO introducerar ett effektivare och extremt flexibelt dual wavelength-system som möjliggör pålitliga, kostnadseffektiva behandlingar av samtliga hårtyper (även de allra tunnaste och ljusaste) och för alla hudtoner. MOTUS PRO gör hårborttagning med alexandrit lika effektiv som smärtfri. Nd:YAG-källan gör det även möjligt att behandla indikationer såsom kapillärer, telangiektasier och tecken på åldrande

- Fler än 10 valbara handtag
- **24 mm spotstorlek**
- Automatiskt igenkänningssystem
- Ergonomisk anslutning till luftkylare

**24 mm
spot storlek**



VASKULÄRA BEHANDLINGAR: LÅNG PULS 1064 nm

MOTUS PRO introducerar en optimerad puls för vasculära behandlingar som maximerar effektiviteten och minimerar smärtan.

TEKNIKEN BAKOM

Innovation med Moveo

Moveohandtagen minskar drastiskt energimängden som reflekteras av huden, genom att arbeta i kontakt med huden med lägre energi. Den här exklusiva teknologin från DEKA passar bra i många olika sammanhang och användningsområden.

moveo **HR**

Fokus på Hårborttagning

MOVEO HR låter behandlaren utföra svepande rörelser över avgränsade områden, vilket ger en gradvis uppvärmning och borttagning av oönskade hårstrån. Proceduren är i princip helt smärtfri och med så gott som noll biverkningar.

moveo **PL**

Fokus på Pigmenteringar

MOVEO PL värmer gradvis upp pigmenteringarna i huden – ett högeffektivt och bekvämt sätt att behandla, utan missfärgning eller hyperpigmentering

moveo **SR**

Fokus på hudföryngring

MOVEO SR ger en progressiv värmeuppbyggnad i dermis vilket stimulerar kollagentillväxten.

moveo **VL**

Fokus på Vaskulära indikationer

MOVEO VL verkar direkt på de vaskulära indikationerna, med reducerad energireflektering. Det gör MOVEO VL extra effektiv mot ytliga, vaskulära rodnader.

moveo **PL** + **SR** + **VL** = moveo**Glo**

Tillsammans med **Moveo Glo** ger **MOTUS PRO** bästa möjliga hudbehandlingar och effektiv kollagenstimulering – bekvämt och utan återhämtningstid.



DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN

Styrkorna hos Motus PRO

- **Kraftfull laserteknolog**
med många olika spotstorlekar, fluenser och repetitionsgrader ger stor flexibilitet och snabba och effektiva behandlingar.
- Passar till **alla hudtyper**, alla typer av hår, alla kroppsdelar.
- **Snabb, säker & smärtfri** med Moveohandtagen.
- **Enkelt att växla mellan våglängder**
och olika behandlingar vid ett och samma tillfälle.
- **enorm kunskap bara ett knapptryck bort**
tack vare den inbyggda databasen som är fullspäckad med protokoll för alla slags hårtyper, hudtyper och behandlingar.
- **Minimal underhållskostnad**



Endast för DEKA användare:

Stöd och resurser alltid tillgängligt.

DEKA Club



Tekniska specifikationer

MOTUS PRO		
Laser Typ	755nm Alexandrit	1064Nd:YAG
Energi per puls *	52 J (max)	63J (max)
Pulsens varaktighet	0,2 - 300 ms	
Repetitionsgrad	Upp till 10 Hz	
Spotstorlekar (valfri)	Från 2,5mm till 24mm, Moveo HR, Moveo PL, Moveo SR, Moveo VL	
Fluense	Upp till 600 J/cm ²	
Mått och vikt	H:114 cm, B:45 cm, D: 94 cm; 100kg	
ElektronikkraV	<16A @ 230 Vac	

Finns även en version med enbart alexandritlaser eller Nd:YAG

VARNING : Synlig och osynlig laserstrålning. Undvik ögon- och hudkontakt med direkt eller spridd strålning. Produkt i laserclass 4.

